

Tira de alcohol en saliva MISSION

La prueba de detección de alcohol en saliva Mission permite realizar exámenes evidenciales para detectar la presencia

La tira de alcohol Mission consiste en una tira de plástico con una almohadilla reactiva en la punta de la misma, la almohadilla reactiva emplea un sistema químico de fase sólida que efectúa una reacción enzimática de alta especificidad, además ser económica, confiable, y fácil de utilizar, por lo que es una excelente opción para realizar exámenes de alcohol ya sea por sospecha, después de un accidente, o de manera aleatoria en su empresa o institución.




Ventajas y Beneficios

- **Rápido y Fácil:** La tira de alcohol en saliva Mission es una prueba rápida y de fácil detección. No requiere equipo adicional.
- **Altamente Recomendable:** Recomendado para uso en el hogar, escuelas, lugares de trabajo, centros de rehabilitación, hospitales etc.
- **Detecta Múltiples Concentraciones:** Una sola tira detecta múltiples concentraciones de BAC de 0.02 a 0.30 %.
- **Económica:** Con una única tira tiene una excelente relación costo/beneficio y efectividad con una pequeña muestra.

Modo de Empleo

1

Recolecte una muestra de saliva en el recipiente (incluido)

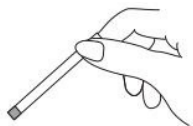

2

Sature de saliva la punta de la tira por 5 segundos.



3

Compare los resultados con la tabla de colores que indica el %BAC

